



Chromai[®]

— 科 诺 美 —



Leaps Pro

超高效液相色谱系统Pro

UHPLC

持续创新 更美生活

Innovation for Better Life

Leaps Pro

超高效液相色谱系统Pro
企业高效进样需求之选

高稳定性

高通量

无损进样



精准满足客户差异化分析需求

生物制药&制药

生物药|化药|中药|辅料

科研教育

高校实验室|科研院所

食品安全

营养成分|有害成分|非法添加

化学材料

化妆品|聚合物|汽柴油

农林畜牧

农药|兽药|饲料

环境监测

污染物监测

职能检测

食药监|海关|农检|质检|商检

公安司法

司法鉴定|法医毒物

分析实验室的UHPLC标准：高效耐用，成本可控

超高效级的应用体验

- 超高耐压最大至10500PSI (720 Bar)，较常规极大提升分析效率
- 高稳定性，更低流速，使得小比例也能够长效稳定准确运行
- 压力脉动抑制技术
- 标配后冲洗和洗针液脱气系统
- 手拧零死体积管线，最大限度的减少额外体积



实现更小体积与无损进样

- 整体环式自动进样器，更适合小体积及微量分析，满足无损进样需求
- 标配4*54样品盘，兼容4*96孔板，实现更高通量
- 接触式高效集成冷却系统
- 支持跨序列运行，多个项目依序进行分析，无需人工干预



精准恒定的控温系统

- 大容量柱温箱，可容纳四根300mm的长色谱柱
- 强制风循环和优化的散热风洞系统，使得温场更加均匀
- 半导体加热及制冷
- 支持十通阀和六通阀等多种阀组件，实现双柱和多柱切换功能




更全面的检测器适配

- 可搭配UVD、DAD、FLD、ELSD*、RID*等
- 支持MS接入



出色的检测性能 获得更加可靠的结果

● 二极管阵列检测器

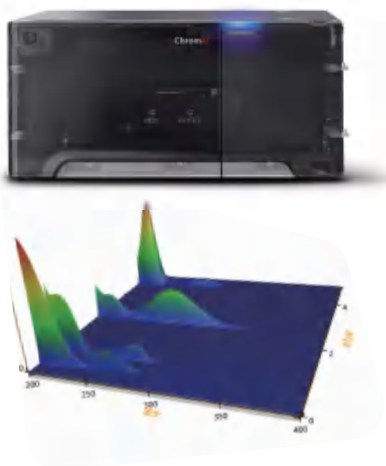

- 1024像素，参比波长消除背景干扰，漂移校正功能
- 狭缝宽度可选，可输出高分辨率光谱，获得更精准的监测数据
- 同时监测12通道波长，所有通道样品波长、样品带宽、参比波长及参比带宽可选
- 3D谱图监测，峰纯度计算功能
- 支持导出光谱扫描范围内的任意一个波长的色谱图

- 超高灵敏度，低扩散全反射流通池
光程长度匹配超高效分析需求
- 最大光程 60mm，实现6倍信号灵敏度




● 紫外-可见检测器



- 光路自动切换，提供波长范围190~900nm
- 2.5AU的线性范围，对高浓度样品同样得心应手
- 标配波长长时间程序，波长切换和停泵扫描功能
- 模块易于维护，光源更换便捷，并可选择多种流通池

● 荧光检测器

- 高灵敏度：采用新型的光路设计，实现超高荧光效率
- 杂光抑制：提供优秀的信噪比水平
- 高采样率：支持超高效液相色谱分离

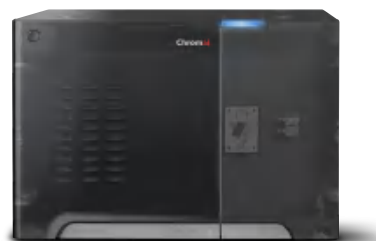

EyouLab 易优智能色谱数据系统

更准确高效的提升实验效率
有效降低营运成本与风险



EyouLab CDS

EyouLab全面符合FDA 21 CFR Part 11、GMP、GLP等法规适用性要求，提供单机版、网络版、医疗版等多场景部署，并支持多语言适配，覆盖至样品前处理到精准医疗。基于数十项专有技术，通过“智能引导式操作界面+云端数据管理”，实现复杂实验的简捷化操作，确保数据完整性与准确性，极大提升实验室整体能力与效率，助力实验室智能化升级。



控制面板

自动序列

多通道数据采集

仪器监控



审计跟踪

数据文件列表

强大的数据处理

属性参数齐全

多种模式数据显示

独立
运行

远程
访问

存档
管理

审计
追踪

风险
管理

- 数据的统一管理和检索
- 全面符合法规适用性要求
- 满足电子数据物理安全性
- 简便的远程访问控制
- 自由访问的网络分析系统
- 安装启动运维简单
- 每个采集端可以控制4套仪器



Leaps

超高效液相色谱系统



Leaps Pro

超高效液相色谱系统Pro



Frontier

超高效液相色谱系统

分析型



Leaps 2D

二维超高效液相色谱系统



Leaps Pro Bio

生物惰性液相色谱系统



Leaps Prep

制备液相色谱系统

二维系统

生物惰性型

制备型

网址：www.chromai.com

科诺美·北京

地址：中国 北京市顺义区西兴路3号院联东U谷·蓝贝科技园10号楼5层

电话：(86-10)80429960

科诺美·苏州

地址：中国 江苏省苏州市吴江区交通路1268号5号楼5层

电话：(86-512)63226066



微信公众号



客服微信